


SharpSentinel® Wall Cabinet System

#1060 Shelf / Estante No. 1060 / Tablette n° 1060



**#1031 Cabinet /
Gabinete No. 1031 /
Armoire n° 1031**

Hooks / Ganchos / Crochets

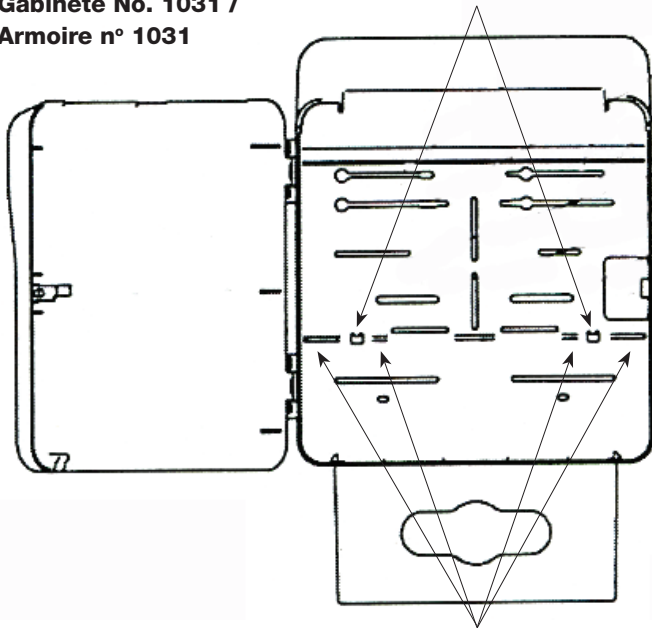

Ledges / Salientes / Pièces d'appui

**Top View of #1060 Shelf /
Vista superior del estante No. 1060 /
Vue du haut de la tablette n° 1060**



Converts #1031 3-Gallon Cabinet, to accommodate a #175 5-Quart Sharps Container

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Unlock and open cabinet door. If a sharps container is enclosed, permanently close lid before removal by inserting locking tabs into slots.
2. Hold shelf with two holes pointing toward back of cabinet and place on top ledges inside cabinet. Slide shelf to back of cabinet making sure hooks on back of cabinet are inserted into holes on shelf to ensure fit. (See diagram.)
3. Place a #175 5-Quart Sharps Container on top of shelf with biohazard label facing front of cabinet.
4. Close and lock door.

Convierte el gabinete de 3 galones No. 1031 para acomodar un contenedor de 5 cuartos de galón para objetos punzocortantes No. 175

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desbloquee y abra la puerta del gabinete. Si hay un contenedor de objetos punzocortantes en el interior, cierre permanentemente la tapa antes de retirarlo, insertando las lengüetas de fijación en las ranuras.
2. Sujete el estante con los dos agujeros orientados hacia la parte trasera del gabinete y colóquelo sobre los salientes ubicados dentro del gabinete. Deslice el estante hasta la parte trasera del gabinete, asegurándose de que los ganchos ubicados en la parte trasera del gabinete queden insertados en los agujeros ubicados en el estante, para asegurar un buen ajuste. (Vea el diagrama.)
3. Coloque un contenedor de 5 cuartos de galón para objetos punzocortantes No. 175 sobre el estante con la etiqueta de riesgo biológico orientada hacia el frente del gabinete.
4. Cierre y bloquee la puerta.


**#1031 Cabinet /
Gabinete No. 1031 /
Armoire n° 1031**

Permet de convertir l'armoire de 11,3 l (3 gal) n° 1031 pour accueillir un contenant d'objets piquants et tranchants de 4,7 l (5 ptes) n° 175

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Déverrouillez et ouvrez la porte de l'armoire. S'il y a un contenant d'objets piquants et tranchants dans l'armoire, fermez-en le couvercle de manière permanente avant de le retirer de l'armoire, en insérant les languettes de verrouillage dans les fentes correspondantes.
2. Tenez la tablette de sorte que deux trous soient orientés vers l'arrière de l'armoire et positionnez-la sur les pièces d'appui supérieures à l'intérieur de l'armoire. Faites glisser la tablette vers l'arrière de l'armoire en vérifiant que les crochets à l'arrière de l'armoire sont insérés dans les trous de la tablette pour un bon ajustement. (Voir l'illustration.)
3. Placez un contenant d'objets piquants et tranchants de 4,7 l (5 ptes) n° 175 sur la tablette de façon à ce que l'étiquette d'avertissement de danger biologique soit orientée vers l'avant de l'armoire.
4. Fermez la porte et verrouillez-la.

Hooks / Ganchos / Crochets

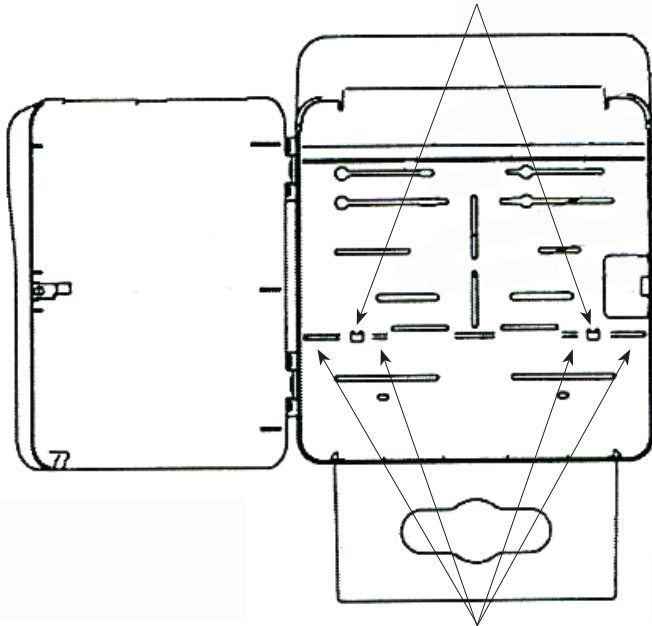

Ledges / Salientes / Pièces d'appui

**Top View of #1060 Shelf /
Vista superior del estante No. 1060 /
Vue du haut de la tablette n° 1060**

