



**Model 538410**  
**Modelo 538410**  
**Modèle 538410**

---

**Quick-Fit™ Suction Liner System**  
**4-Canister Stopcock Manifold**

**Quick-Fit™ Sistema de bolsas recolectoras para aspiración**  
**Múltiple de llaves de paso para 4-depósitos**

**Quick-Fit™ Système de poches d'aspiration**  
**Collecteur de robinet d'arrêt 4-boîtes**



Contains or presence of phthalate

Contenido o presencia de ftalato

DEHP

Contient du phtalate

Lot No. / N.º de lote / No de lot

11/2020 Rev. 5.0  
©2020 5995080 005

# Directions for Use

## MANIFOLD WITH TANDEM TUBING


1. Clip manifold to top of stand.
2. Attach tubing connections of manifold to the ports underneath the reusable canister/bracket.
3. Attach patient tube to the patient port of any of the four Quick-Fit liners.
4. Attach tandem tube to the tandem port of the first canister and to the patient port of the next canister.
5. Repeat the tandem-to-patient, tandem-to-patient connection until the last canister is reached.
6. Cap last tandem port and all pour spouts.
7. Connect vacuum tubing to the manifold vacuum port.
8. Open stopcock on manifold to all Quick-Fit liners.

MODEL #	
538410	4-Liner Stopcock Manifold
537010	18" Tandem Tubing (25/case)
536510	18" Tandem Tubing (100/case)
534910	4-Canister Stand

## WHEN CANISTERS ARE FULL:

1. LEAVE VACUUM ON AND STOPCOCKS OPEN while removing patient and tandem tubing.
2. Cap all pour spots, patient ports, and tandem ports.
3. Turn off all stopcocks.
4. Disconnect vacuum tube from vacuum port of all liners and cap ports.
5. Dispose of liners according to hospital policy.

**Note:** All used and unused liners must be discarded.

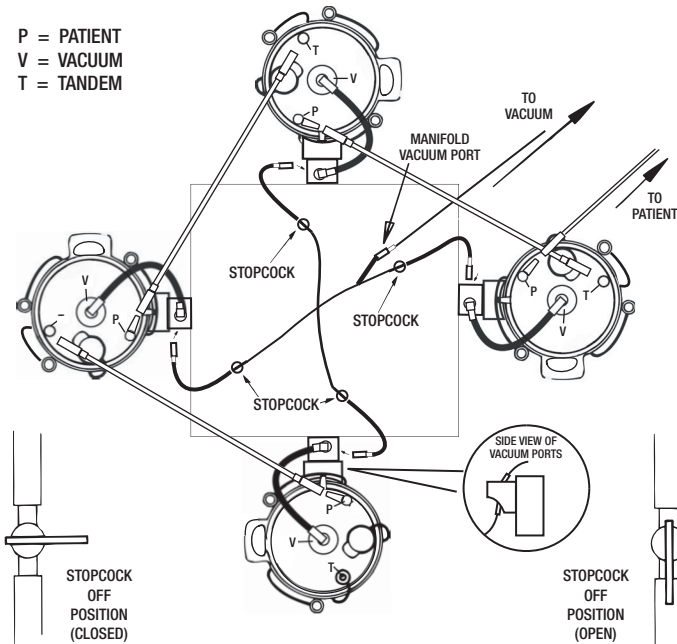

# Quick-Fit™ Suction Liner System 4-Canister Stopcock Manifold

## MANIFOLD ONLY

1. Clip manifold to top of stand.
2. Attach tubing connections of manifold to the ports underneath the reusable canister/bracket.
3. Attach patient tube to the patient port of any of the four Quick-Fit liners.
4. Cap pour spouts and tandem ports of all canisters. (The patient ports of the other canisters do not have to be capped if the stopcock for that canister is closed.)
5. Open stopcock for the first container; close stopcocks for the other containers.
6. Connect vacuum tubing to the manifold vacuum port.

MODEL #

538410

4-Liner Stopcock Manifold

534910


4-Canister Stand

## WHEN CANISTERS ARE FULL:

1. Remove the patient tube and cap the patient port.
2. Close the stopcock.
3. Attach the patient tube to the patient port of the next canister.
4. Open stopcock for the second canister.
5. Disconnect vacuum tube from the vacuum port of full canister.
6. Replace full liner if necessary and dispose of according to hospital policy.

**Note:** All used and unused liners must be discarded after procedure.

**IMPORTANT:** Be sure that the patient port is capped before closing stopcocks or disconnecting vacuum tubing.

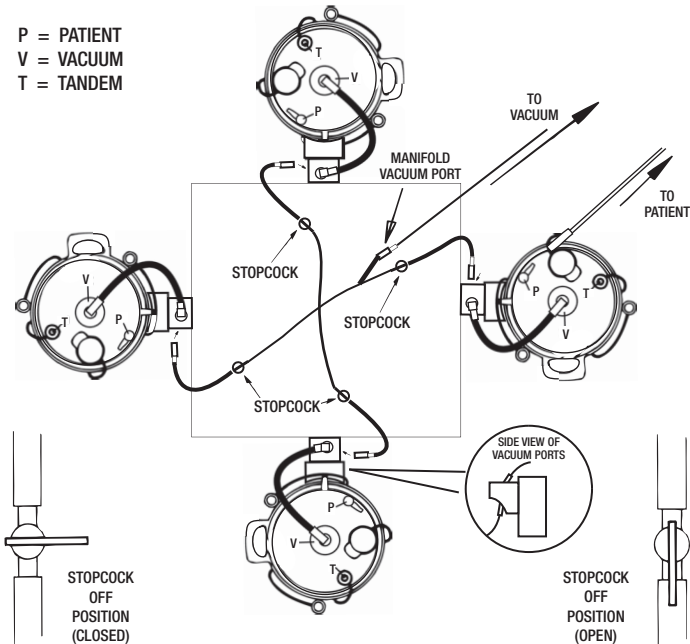

# Indicaciones de uso

## MÚLTIPLE CON TUBOS EN TÁNDEM


1. Abroche la vía múltiple a la parte superior del soporte.
2. Conecte los tubos de conexión de la vía múltiple a los puertos situados bajo los depósitos reutilizables/brazos.
3. Conecte el tubo de paciente al puerto de paciente de cualquiera de las cuatro bolsas Quick-Fit.
4. Conecte el tubo del tándem al puerto de conexión en tándem del primer depósito y al puerto de paciente del siguiente depósito.
5. Vuelva a realizar la conexión tándem a paciente, tándem a paciente hasta llegar al último depósito.
6. Tape el último puerto de la conexión en tándem y todos los picos de vertido.
7. Conecte los tubos de aspiración al puerto de aspiración de la vía múltiple.
8. Abra la llave de paso de la múltiple hacia todas las bolsas Quick-Fit.

N.º DE MODELO	
538410	4-Múltiple de llaves de paso para 4 bolsas
537010	Tubos en tándem de 18 pulgadas (25 por caja)
536510	Tubos en tándem de 18 pulgadas (100 por caja)
534910	Soporte para 4 depósitos

## WHEN CANISTERS ARE FULL:

1. DEJE LA ASPIRACIÓN ENCENDIDA Y LAS LLAVES DE PASO ABIERTAS mientras retira los tubos de paciente y de conexión en tándem.
2. Tape todos los picos de vertido, los puertos de paciente y los puertos de conexión en tándem.
3. Cierre todas las llaves de paso.
4. Desconecte el tubo de aspiración del puerto de aspiración de todas las bolsas recolectoras y tape los puertos.
5. Deseche las bolsas según las normativas del hospital.

**Nota:** todas las bolsas recolectoras, usadas o no, deberán desecharse.

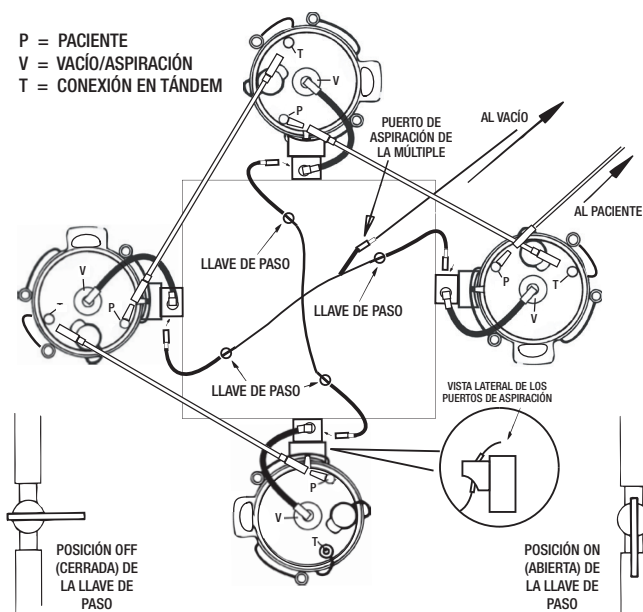

# Quick-Fit™ Sistema de bolsas recolectoras para aspiración Múltiple de llaves de paso para 4-depósitos

## MÚLTIPLE SOLAMENTE

1. Abroche la vía múltiple a la parte superior del soporte.
2. Conecte los tubos de conexión de la vía múltiple a los puertos situados bajo los depósitos reutilizables/brazos.
3. Conecte el tubo de paciente al puerto de paciente de cualquiera de las cuatro bolsas Quick-Fit.
4. Tape los picos de vertido y los puertos de conexión en tándem de todos los depósitos. (No es necesario tapar los puertos de paciente de los otros depósitos si las llaves de paso hacia esos depósitos están cerradas).
5. Abra la llave de paso del primer depósito y cierre las llaves de paso de los otros depósitos.
6. Conecte los tubos de aspiración al puerto de aspiración de la vía múltiple.


N.º DE MODELO	
538410	4-Múltiple de llaves de paso para 4 bolsas
534910	Soporte para 4 depósitos

## CUANDO EL PRIMER DEPÓSITO ESTÉ LLENO:

1. Retire el tubo de paciente y tape el puerto de paciente.
2. Cierre la llave de paso.
3. Conecte el tubo de paciente al puerto de paciente del siguiente depósito.
4. Abra la llave de paso del segundo depósito.
5. Desconecte el tubo de aspiración del puerto de aspiración del depósito lleno.
6. Reemplace la bolsa recolectora llena si es necesario y deséchela según las normativa del hospital.

**Nota:** todas las bolsas recolectoras, usadas o no, deberán desecharse después del procedimiento.

**IMPORTANTE:** asegúrese de que el puerto de paciente esté tapado antes de cerrar llaves de paso o desconectar tubos de aspiración.

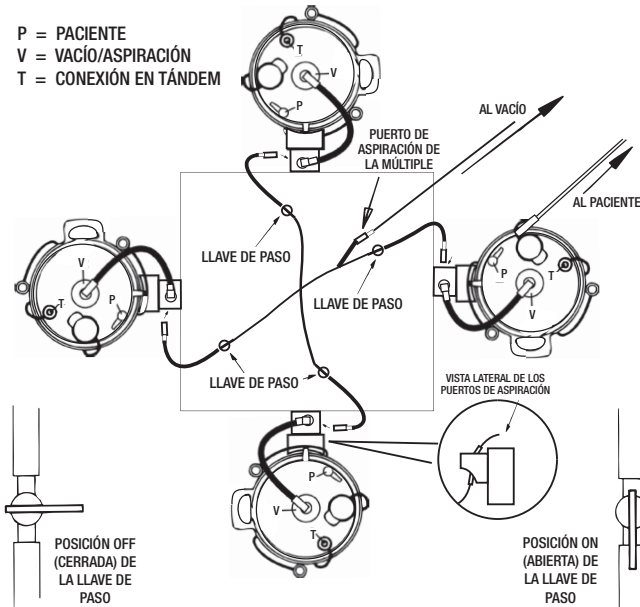

# Mode d'emploi

## COLLECTEUR AVEC TUBULURE TANDEM


1. Fixer le collecteur par sa pince en haut du support.
2. Attacher les raccords de tubulure du collecteur aux prises situées sous la boîte/l'étrier réutilisable.
3. Attacher la tubulure patient à la prise patient d'une des quatre poches Quick-Fit.
4. Attacher la tubulure tandem à la prise tandem de la première boîte et à la prise patient de la boîte suivante.
5. Reprendre le raccordement tandem-patient, tandem-patient jusqu'à la dernière boîte.
6. Fermer la dernière prise tandem et tous les becs verseurs.
7. Raccorder la tubulure de vide à la prise de vide du collecteur.
8. Ouvrir le robinet d'arrêt du collecteur vers toutes les poches Quick-Fit.

N° DE MODÈLE	
538410	Collecteur à robinets d'arrêt 4 poches
537010	Tubulure tandem de 45,7 cm (25/caisse)
536510	Tubulure tandem de 45,7 cm (100/caisse)
534910	Support 4 boîtes

## UNE FOIS LES POCHEs PLEINES :

1. LAISSER LE VIDE EN MARCHÉ ET LES ROBINETS OUVERTS tout en retirant la tubulure patient et la tubulure tandem.
2. Fermer tous les becs verseurs, les prises patient et les prises tandem.
3. Fermer tous les robinets d'arrêt.
4. Déconnecter la tubulure de vide à la prise de vide de toutes les poches et fermer les prises.
5. Jeter les poches conformément au mode opératoire de l'hôpital.

**Remarque :** Toutes les poches utilisées et inutilisées doivent être jetées.

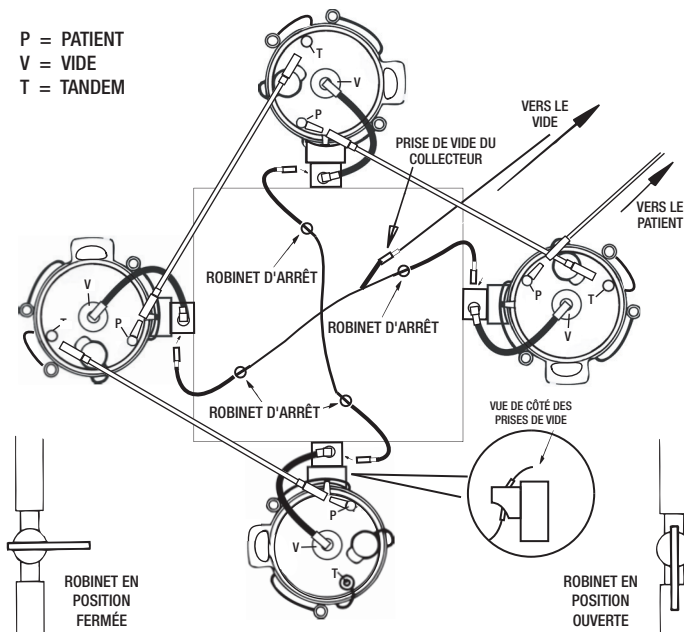

# Quick-Fit™ Système de poches d'aspiration Collecteur de robinet d'arrêt 4-boîtes

## COLLECTEUR SEULEMENT

1. Fixer le collecteur par sa pince en haut du support.
2. Attacher les raccords de tubulure du collecteur aux prises situées sous la boîte/l'étrier réutilisable.
3. Attacher la tubulure patient à la prise patient d'une des quatre poches Quick-Fit.
4. Fermer les becs verseurs et les prises tandem de toutes les boîtes. (Les prises patient des autres boîtes n'ont pas besoin d'être fermées si le robinet d'arrêt de cette boîte est fermé.)
5. Ouvrir le robinet d'arrêt de la première boîte ; fermer celui des autres boîtes.
6. Raccorder la tubulure de vide à la prise de vide du collecteur.


N° DE MODÈLE	
538410	Collecteur à robinets d'arrêt 4 poches
534910	Support 4 boîtes

## LORSQUE LA PREMIÈRE BOÎTE EST PLEINE :

1. Enlever la tubulure patient et fermer la prise patient.
2. Fermer le robinet d'arrêt.
3. Attacher la tubulure patient à la prise patient de la boîte suivante.
4. Ouvrir le robinet d'arrêt de la deuxième boîte.
5. Déconnecter la tubulure de vide de la prise de vide de la boîte pleine.
6. Remplacer la poche pleine si nécessaire et jeter conformément au mode opératoire de l'hôpital.

**Remarque :** Toutes les poches utilisées et inutilisées doivent être jetées après la procédure.

**IMPORTANT :** S'assurer que la prise patient est fermée avant de fermer les robinets d'arrêt ou de déconnecter la tubulure de vide.

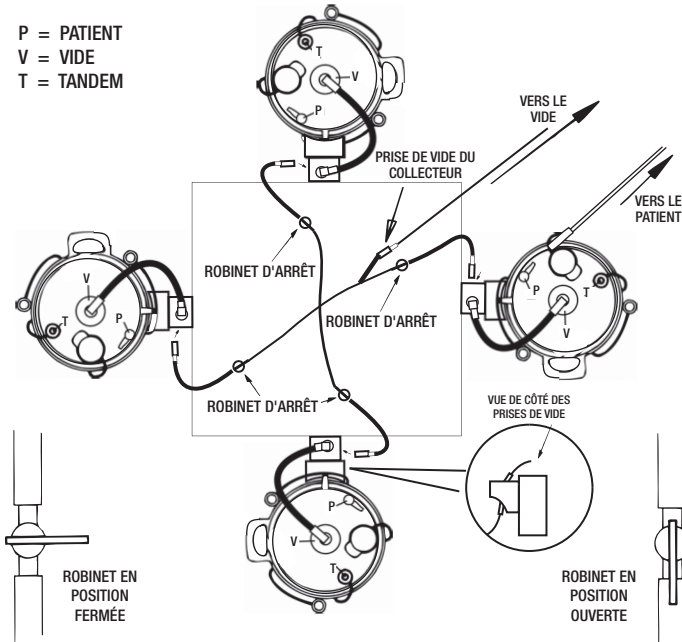



Bemis Manufacturing Co., 300 Mill Street, Sheboygan Falls, WI 53085 USA  
920-467-4621 • 800-558-7651 • FAX 800-499-8160  
Customer.Service@BemisHealthCare.com • [www.bemishealthcare.com](http://www.bemishealthcare.com)